

# NOVÉ

## 7D HIFU



Lifting obličej | Odstranění vrásek | Odstranění kontur těla | Redukce tuku

# Teorie

Bez ovlivnění nechtěných oblastí nebo vrstev tkáně během ošetření zaměřují kazety poháněné MMFU přesné paprsky ultrazvukové energie do cílových oblastí kožní tkáně pro lifting a zpevnění obličeje a podkožních tukových vrstev pro vyvolání kontrakcí a odstranění nepoddajných tukových buněk z těla.

## ✓ Fáze prohřátí

Ultrazvuková energie přenášená přímo do dermis způsobuje zahřátí kožní tkáně, po kterém následuje přirozený proces fibroplazie neboli migrace nové pojivové tkáně za účelem hojení.

## ✓ Fáze přestavby

V místě ošetření se vytvoří granulační tkáň, která vytvoří pevnější a rovnoměrnější vrstvu kolagenových vláken. Na vnějším povrchu pacient zaznamená zmenšení vrásek a vypnutí pleti v období od 3 týdnů do 6 měsíců.

## ✓ Přesné zacílení

Hlavice poháněné MMFU jsou navrženy tak, aby do ohniskové oblasti přenášely jak koncentrovanou, tak stabilní ultrazvukovou energii. Příkladový přístroj Ulove7Dplus je zkonstruován tak, aby vyzařoval rovnoměrné rozložení tepla, a díky tomu se přesně zaměřuje na široké nebo úzké oblasti zájmu, aniž by při individuálních zákrocích poškozoval okolní tkáň.

## ✓ MICRO FOCUSED


Hlavice s vysoce koncentrovanými ultrazvukovými paprsky dodávají výkon s přesností a precizností do určené oblasti ohniska.






## MACRO FOCUSED

Náboje s nižšími frekvencemi umožňují hlubší průnik do ohniskové oblasti s vyšší hustotou energie.

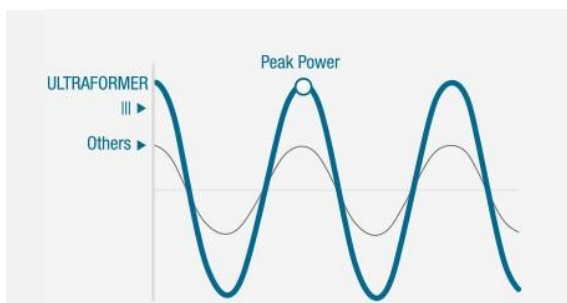

### DVOJITÝ MOTOR S VYSOKÝM ŠPIČKOVÝM VÝKONEM

Ultrazvuková energie je nasměrována do cílových vrstev bez tepelného působení na okolní materiál, což přináší méně palčivých, mírnějších a účinnějších výsledků.




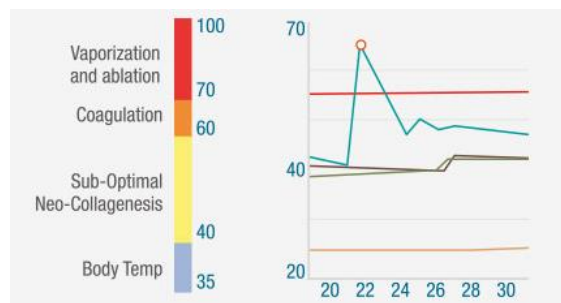


### MMFU TEPELNÁ ENERGIE

Při aplikaci energie do cílových vrstev dochází k přirozeným koagulačním a hojivým procesům, které stimulují obnovu kolagenu pod epidermem.

## Výsledky s MF2

Hlavice Ulove7Dplus o průměru 2,0 mm neboli "MF2" je navržena tak, aby výrazně redukovala jemné linky a vrásky na čele pacienta a v okolí očí a úst. Při pevném kontaktu s kůží se tento překvapivě tenký snímač dokáže zaměřit na úzké oblasti a kontury obličeje, což je příliš výjimečná vlastnost, než aby se dala napodobit.

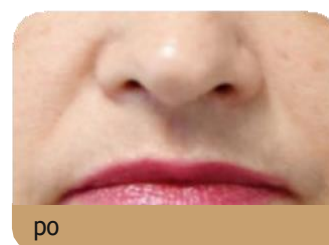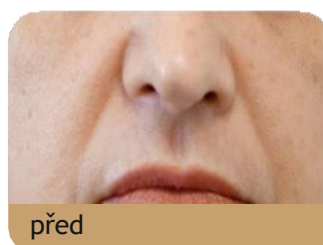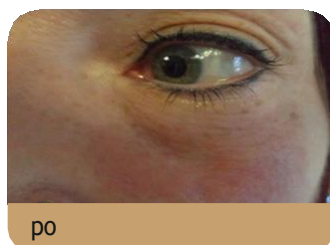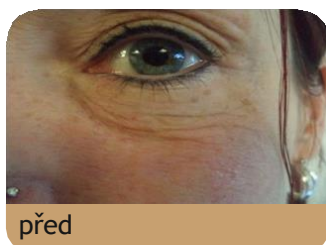

Citlivé a mělké oblasti kolem čela, očí a úst lze snadno ošetřit díky úzkému ohnisku a přesnosti podporované technologií MF2.

Nová a vylepšená štíhlá konstrukce přístroje MF2 přináší značný komfort díky lepšímu výhledu při aplikaci na citlivá místa.




MF2



## Výhody pro všechny

Ulove7Dplus je jednoduché, ale účinné zařízení, které řeší problémy pacientů. Díky velmi pohodlným postupům, po kterých následují výborné výsledky, připravte na to, že budete ohromeni.

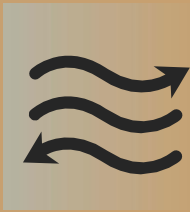

## Nová vlna HIFU

Přístroj Ulove7Dplus vysílá rovnoměrné ultrazvukové paprsky přímo do několika cílových vrstev pod kůží, čímž podporuje pevnější tvorbu kolagenu, stahování tkání a zmenšování objemu adipocytů ve vypouklých oblastech těla, a to vše bez nutnosti použití nože nebo jehly.

## Víceúrovňové ošetření

Více hloubkových hlavic, včetně hlavice MF2, přístroje Ulove7Dplus je určeno pro individuální postupy, které řeší problémy pacientů a umožňují jim znovuobjevit jejich potenciál, ať už jde o redukci jemných linek a vrásek nebo tvarování specifických oblastí těla.

- Neinvazivní postup
- Přírozená postupné výsledky
- Doba trvání procedury 15-20 minut
- Nulový downtime
- Není nutná anestezie
- Není nutná žádná předchozí příprava
- Žádné požadavky po léčbě
- Minimální nežádoucí účinky
- Minimální požadavky pro přijetí léčby

## Co můžete léčit přístrojem Ulove7Dplus?



Oblíče, krk, dekolt a tělo



Ochablá pleť, jemné linky a vrásky



Známky stárnutí



Tvarování postavy a zatvrzelý tuk




před



po



# Specifikace

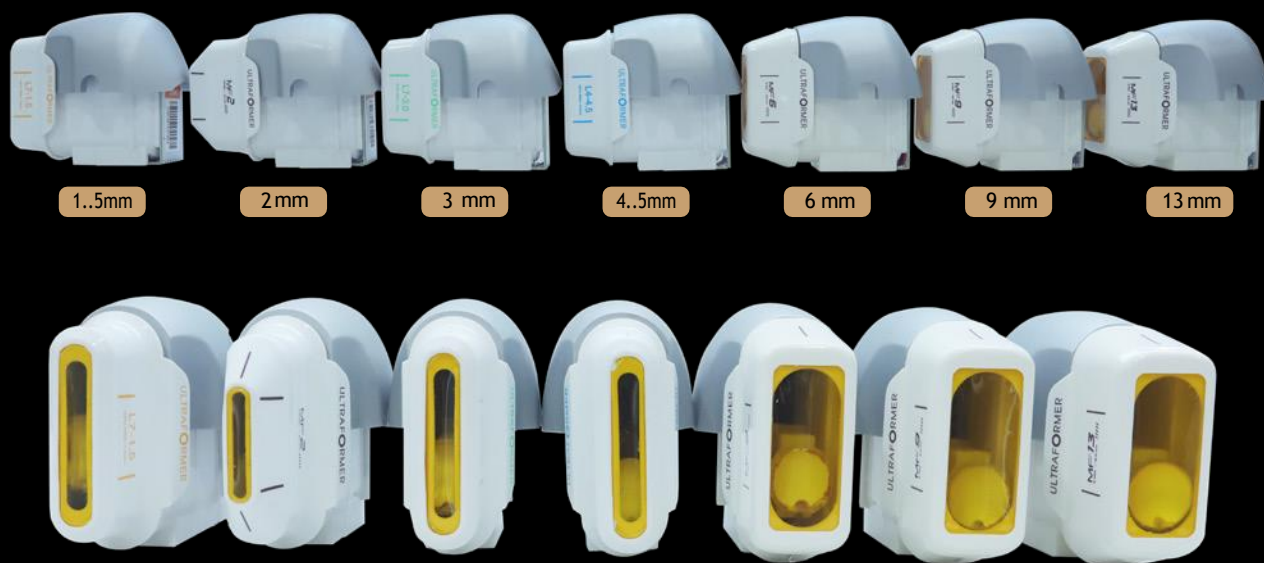

Typ energie	Ultrazvuk s vysokou energií (HIFU)
Délka	5,0-25 mm (jednotka nastavení 5 mm)
Power	0,1-3,0J (jednotka nastavení 0,1J)
Jmenovité napětí	100~240V, 50Hz
Rozteč bodů	1-2 mm (jednotka nastavení 0,1 mm)
Hmotnost	35 kg
Velikost	500*515*1310 mm
Sonda	L4-4,5(4MHz/4,5mm) L7-3,0(7MHz/3,0mm) L7-1,5(7MHz/1,5mm) MF2(5,5MHz/2,0mm) MF6(2MHz/6,0mm) MF9(2MHz/9,0mm) MF13(2MHz/13,0mm)

Dodavatel v ČR: Globa retail s.r.o., sídlem Kozí 4 Brno 60200

IČ: 29371210, DIČ:CZ29371210

Telefon: +420608821197, email: info@globalretail.cz